

[illegible]

A row of five mobile ultrasound machines. Each machine consists of a monitor mounted on a stand, a control panel with a joystick and buttons, and a large, wheeled base. The machines are arranged in a slightly curved line, with the central one being the most prominent. The monitors display various ultrasound images, including a large image of a heart on the central machine.

CHISON
Value Beyond Imaging

Эргономика

19" LED монитор
(позволяет движение
вверх-вниз, и наклон в 90°)



Depth View



Вращение LED монитора
справа-налево до 90° позволяет
разные углы осмотра для врача
и пациента

Стерео аудио система



Упрощенная клавиатура
с подсветкой

Вращающаяся клавиатура,
справа-налево: 0 ~ 45°
вверх-вниз: 0см-15см.



Hero Kit

Инновационный дизайн
для легкого обслуживания



USB порты



Съемный пылевой фильтр

Встроенный аккумулятор 80
мин (опция)



Удобное расположение лотка для бумаги

35,6 см
Компактность

Четыре колеса с замками



Виртуальный HD

- Виртуальный HD является прорывом в технологии 4D в режиме реального времени.
- Повысит доверие врача к диагнозу и укрепит связь между матерью и плодом. При использовании подвижного виртуального источника света.


Здоровье Женщин




БПР, Режим В



Пупочный Канатик, Режим С

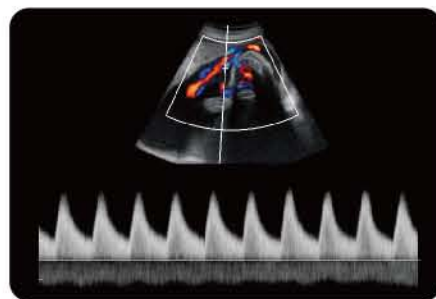

Пупочный Канатик, Режим РW

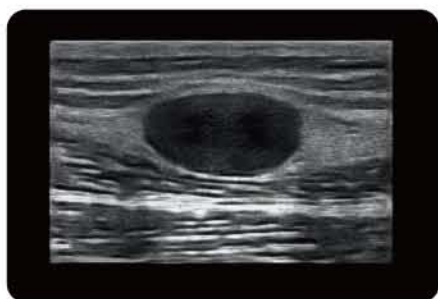


Киста Молочной Железы, Режим В



Матка, Режим В



Ранняя Беременность, Режим В

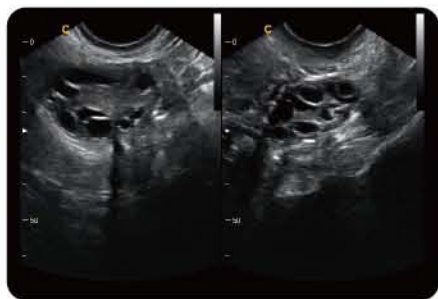

Яичник, Режим 2В



Лицо Плода, Режим 4Д



Тело Плода, Виртуальный HD

FHI

Инновационная технология, использующая различные передачи и методы приема для максимального разрешения без потери проникновения ультразвукового луча. Эта технология улучшает глубину проникновения и позволяет проводить исследования сложных пациентов с помощью одного-единственного датчика.



Исследование для кардиологии


QBit 9




4-камеры, Режим FHI




4-камеры, Режим C

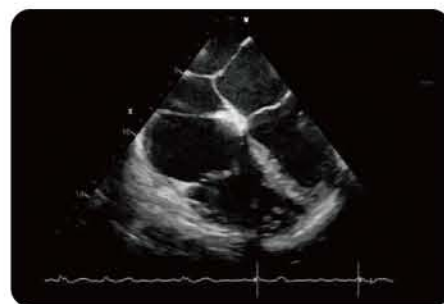

Сердце, TEE

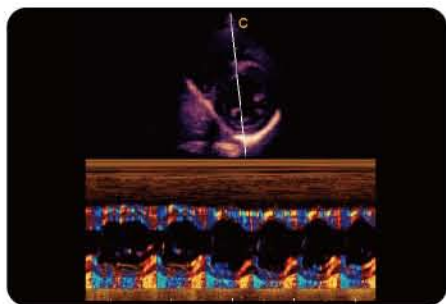

Папиллярный Мускул Короткой Оси,
Режим TDI

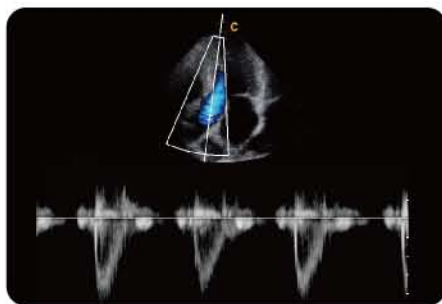

Аортальный Клапан,
Режим PW





Регургитация Аортального Клапана,
Режим CW

Потрясающая Характеристика



PISA

Площадь формирующейся струи митральной регургитации, При цветном доплеровском сканировании под стенозированным митральным отверстием, то есть в полости левого желудочка, отчетливо виден полукруг/полуокружность (та самая красно-синяя граница, о которой толкуют буржуины).

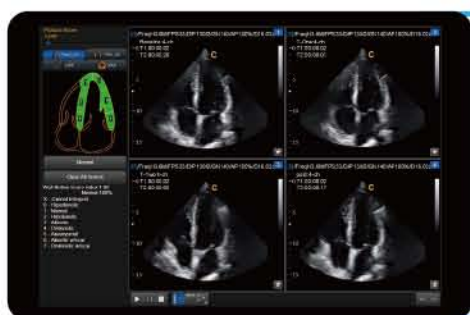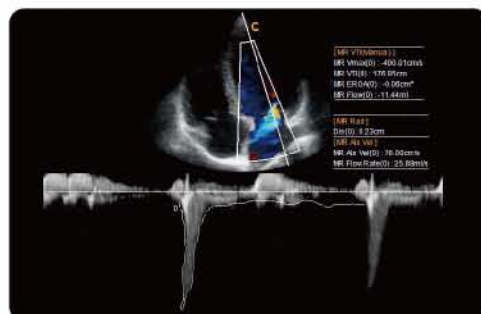


Стресс Эхо

Обеспечивает точное измерение функции миокарда в ответ на внешний стресс или лекарственный препарат.

Тканевой Допплер (цветовой, спектральный)

Тканевой Допплер - количественная оценка локальной сократительной функции стенок ЛЖ и ПЖ.

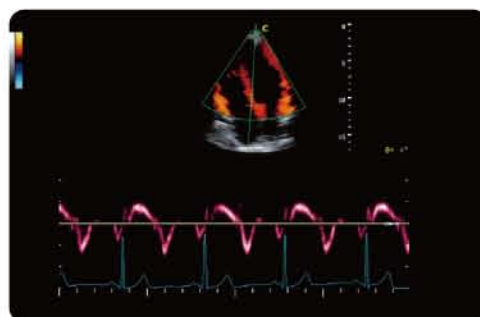


Анатомический М-Режим

Три линии могут вращаться 360 градусов. Вы можете вращаться по вашему желанию. Этот модель специально для торчания вершины сердца.

Передовые Технологии


Q-image

- Эти инновационные алгоритмы в три раза результаты улучшат визуализацию на квантовом уровне.
- Передовой чипсет обеспечивает хорошую частоту кадров.

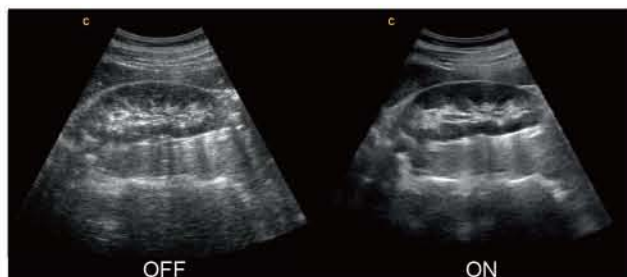


Q-beam

- По сравнению с традиционным двухлучевым устройством на большинстве УЗИ аппаратов, QBit использует четырех лучевую технологию для приема ультразвукового сигнала.
- За счет применения технологии удваивает объем сигналов, увеличивает разрешение изображения, повышает частоту кадров, обеспечивая лучшую диагностику, уверенности и эффективности.

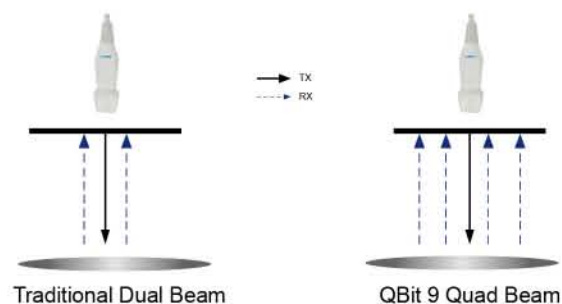

Q-flow

- Инновационная технология, позволяющая лучше визуализировать мельчайшие сосуды и картину кровотока, на основе эксклюзивного алгоритма обработки.
- В результате, цвет чувствительность потока с малой скоростью значительно усиливается.

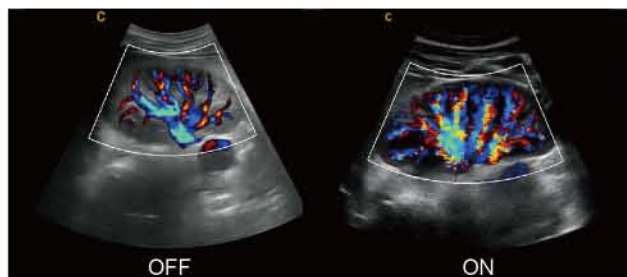

X-contrast

- Значительно повышенный контраст разрешения различных тканей, улучшенное соотношение сигнал-шум.
- Активированный одним ключом: Повышать, Нормальный, Подавлять.





Изображения по Малым Органам



Сонная Артерия, Режим С




Локоть, Режим В



Щитовидная Железа, Режим В




Сонная Артерия, Режим С

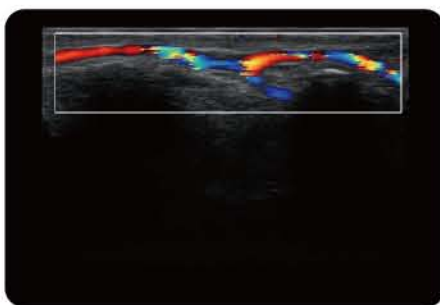

Сосуд Пальца, Режим С



Щитовидная Железа, Режим С

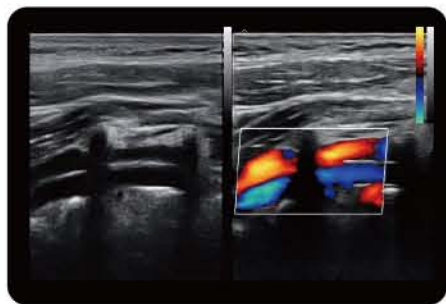


Позвоночная Артерия, Режим 2В



Мускул, Изогнутое Панорамное Сканирование



Почка, Режим С

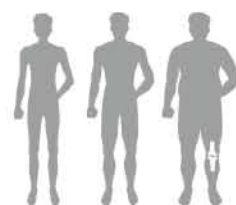



QBit 9

Умный УЗИ



Конвексный
(2.0МГц-6.8МГц) D3C60L



Линейный
(4.0МГц-15.0МГц) D7L40L



Линейный (CFH)
(7.0МГц-18.0МГц) D12L40L



Линейный
(4.0МГц-15.0МГц) D7L60L-60mm



Трансвагинальный
(4.0МГц-12.0МГц) D6C12L



Секторный фазированный
(1.5МГц-5.3МГц) D3P64L



Трансвагинальный
(4.0МГц-15.0МГц) D7C10L



Трансректальный
(4.0МГц-15.0МГц) D7L40L-REC



Объемный
(2.0МГц-6.8МГц) V4C40L



Микро-конвексный
(2.0МГц-6.8МГц) D3C20L



Секторный фазированный
(2.0МГц-8.0МГц) D6P64L



Микро-конвексный
(4.0МГц-12.0МГц) D6C15L



Микро-конвексный
(4.0МГц-10.7МГц) D5C20L



Чреспищеводный
(4.0МГц-6.0МГц) (Взрослый)
T5P64L



Чреспищеводный
(2.0МГц-6.0МГц) (Педиатрия)
MT5P48L



Карандашный
(1.5МГц-2.5МГц)
D2D16L



Линейный
(Интраоперационный)
D7L30L

CHISON Medical Technologies Co., Ltd.

Sales & Service Contact Address:

No.9, Xinhuihuan Road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu, China 214028

T E L : 0086-510-85310593 / 85310937

F A X : 0086-510-85310726

EMAIL : export@chison.com.cn

We reserve the right to make changes to this catalogue without prior notice.
Please contact our local dealer for the latest information.

QBit 9-20180206